



PRODUKTHIGHLIGHTS

Klinion® Wundversorgung

Klinisch bewährte Lösungen für jede Phase der Wundheilung –
von der Erstversorgung bis zur Kompression.

IHR KENNENLERNANGEBOT
Sprechen Sie uns an.



at the heart of healthcare


DER PARTNER AN IHRER SEITE

Wundversorgung, die Vertrauen schafft – Qualität, die man fühlt.

Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Wundversorgung steht Klinion für zuverlässige, klinisch erprobte Produkte zur Behandlung akuter und chronischer Wunden. Das Sortiment umfasst Lösungen für die traditionelle und moderne Wundversorgung, Kompressionstherapie sowie die Erstversorgung.

Von der Exsudataufnahme über die Förderung der feuchten Wundheilung bis hin zur Fixierung und Kompression bietet Klinion bedarfsgerechte Produkte für unterschiedliche Wundsituationen und Heilungsphasen.

Dabei verbinden wir hohe Funktionalität mit Anwenderfreundlichkeit und Patientenkomfort. Die Produkte entsprechen den Anforderungen moderner Wundversorgung und bieten eine leistungsstarke Alternative zu etablierten Marken.

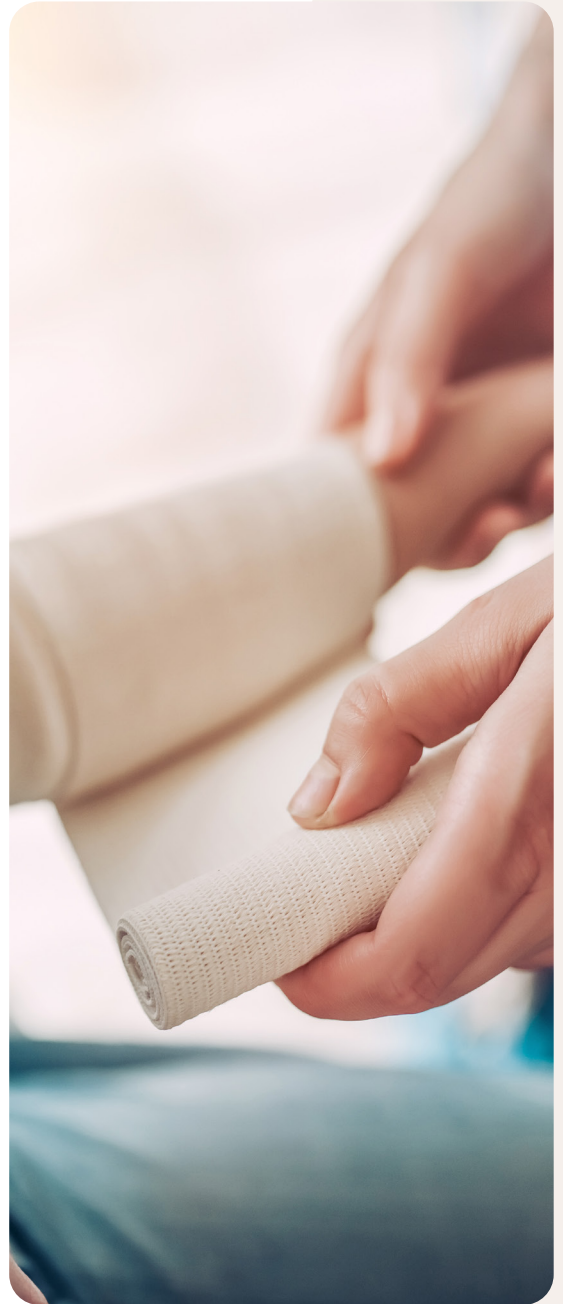

VERANTWORTUNGSVOLL HANDELN

Ausgewählte Produkte erfüllen definierte Umweltkriterien und unterstützen einen bewussten Ressourceneinsatz.



Lösungen, entlang der Wundheilung. Ein Sortiment für jede Phase.

DEBRIDEMENT

5

HYDROFASER ANTIMIKROBIELL

7

SILIKONSCHAUMVERBÄNDE

9

SUPERABSORBER

14

HAUTKLEBER

16

FOLIENVERBÄNDE

17

PFLASTER & KOMPRESSEN

18

FIXIERBINDEN & KOMPRESSION

19

Klicken Sie auf die Seitenzahlen um zu den einzelnen Rubriken zu gelangen.

KLINIDERM® DEBRIDE

kliniderm® Debride

Entfernt Biofilm.
Hocheffizient und schonend.



Wann sollte das Produkt angewendet werden?

- Beim mechanischen Debridement komplexer Wunden

Was sind die Merkmale?

- Intuitives Design für sicheren Halt und präzise Anwendung
- Fingerförmige Ausführung für kleine, tiefe Wunden und optimale Kontrolle
- Hochwirksame Monofilamentfasern zur effizienten Wundreinigung
- Beidseitig nutzbar für die wirtschaftliche Anwendung
- Weiche Monofilamentschlingen minimieren Schmerzen
- Effektive Aufnahme von Exsudat und Entfernung von Biofilm sowie Bakterien
- Angenehm weiche Haptik für kontrollierte Druckausübung
- Weiche Kanten für zusätzlichen Anwendungskomfort
- Wasserabweisende Rückseite schützt vor Durchnässen



Für mehr
Informationen

Klinisch getestet

96%

Effektives
Debridement

+ 21%

Mehr Epitheli-
sierung

- 18%

Weniger Schorf-
anteil

0%

Schorfbildung
nach Behandlung

Klinische Vergleichs-
bewertung
*Wounds UK | Band 18 |
Nr. 3 | 2022*



Klinion® kliniderm® debride · steril

Weiches Polyesterfaser-Pad für ein schnelles, effektives und schmerzarmes mechanisches Debridement komplexer Wunden. Entfernt Biofilm hocheffizient und schonend. Über Hand oder Finger geführt – für präzise Kontrolle ohne spezielle Schulung.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40511800	14 x 10 cm	5	100
40511801	8 x 4 cm	5	60





Klinion® Kliniderm®

Super fiber + Antimicrobial Polymer Technology (APT™)



Polaroid
Therapeutics



Kliniderm Super fiber + Antimicrobial Polymer Technology (APT™)

Die **Carboxymethylcellulose (CMC)-Faser** nimmt Wundexsudat auf und bildet ein Gel, das die Feuchtigkeit bindet und so dazu beiträgt, ein optimales Umfeld für die Wundheilung zu schaffen.


Das APT™ ist in die Fasern integriert, wodurch sichergestellt wird, dass **die antimikrobielle Wirkung im Verband verbleibt**.

*gleichmäßig verteilte Polymerbeschichtung auf der Faser

APT™ Polymer in die
Fasern integriert^{1,2}

80% Carboxymethyl-
cellulose-Garn

20% verstärkte
Fasern (Lyocell®)

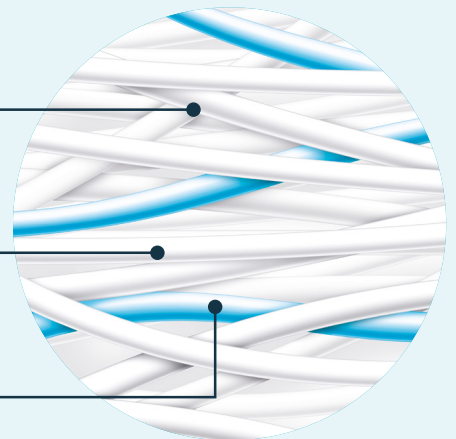

**Breitbandige
antimikrobielle
Wirksamkeit**



**Kann das Risiko von
Antibiotikaresistenzen
reduzieren**



**Silberfreier
antimikrobieller
Schutz**



**Klasse IIb
Medizin-
produkt**

for those who care

Klinion® kliniderm® super fiber + APT™ · steril

Anpassungsfähiger CMC-Faserverband mit verstärkenden Zellulosefasern und integrierter Antimicrobial Polymer Technology (APT™). Hohe vertikale Absorption, behält im nassen Zustand die Faserstruktur und reduziert die bakterielle Besiedlung.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40511813	5 x 5 cm	10	200
40511814	10 x 10 cm	10	100
40511815	15 x 15 cm	5	100
40514816	2 x 45 cm	5	100

**WAS IST MEDIQ SELECT?**

Mediq Select ist die neue Dachmarke für die Mediq Eigenmarken. Sie vereint Marken wie Klinion, Curion und Absorin unter einem gemeinsamen Namen und sorgt für einen einheitlichen Auftritt innerhalb des Mediq Portfolios.

Gleichzeitig steht **Mediq Select** für die hohe Mediq Qualität und die hohe Zuverlässigkeit, die Kunden von Mediq erwarten.

Ihr Mediq Team begleitet Sie während der gesamten Umstellung.
Telefon 0800 5196100 · business@mediq.de

KLINIDERM® FOAM SILICONE BORDER FLEXIBLE

kliniderm® Flexibler Silikonschaum- verband mit Hafttrand



Besonders flexibel und dehnbar.
Bleibt sicher an Ort und Stelle.

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

- Bei mäßig bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden
- Während des gesamten Heilungsprozesses einsetzbar
- Für Druckgeschwüre, venöse und diabetische Ulcera, Hautrisse, Schnittwunden sowie postoperative Wunden

Was sind die Merkmale?

- Einzigartige Z-förmige Schnitte für hohe Flexibilität und Dehnbarkeit
- Sanfter Silikonhafttrand für sichere Fixierung und atraumatische Entfernung
- Absorbiert Exsudat zuverlässig und schützt die umgebende Haut
- Wirksam unter Kompressionsverbänden und Strümpfen
- Transparentes Design für Wundkontrolle – bis zu 7 Tage Tragezeit

Klinisch getestet

96%

Bewertung der
Flexibilität als
"außergewöhnlich"

84%

würden zu kliniderm
foam silicon border
flexible wechseln

Klinische Bewertung

Dr. Tímea Hevér PhD, Army Hospital, Dr. László Zoltán
Ternyik, Medcover Private Hospital, Budapest, Hungary
01 | 2025



Für mehr
Informationen

Klinion® kliniderm® foam silicone border flexible · steril

Einzigartige Z-förmige Schnitte für maximale Flexibilität und Dehnbarkeit – bleibt bei Bewegung sicher an Ort und Stelle. Das transparente Design erlaubt die Kontrolle von Exsudat, ohne die Wunde zu stören.



REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40514890	7,5 x 7,5 cm	5	100
40514891	10 x 10 cm	5	100
40514892	12,5 x 12,5 cm	5	100
40514893	15 x 15 cm	5	100
40514894	10 x 20 cm	5	100
40514895	10 x 30 cm	5	100
40514896	15 x 20 cm	5	100



KLINIDERM® FOAM SILICONE

kliniderm® Silikonschaum- verband

Passt sich dem Körper an.
Schützt die Wunde sanft.

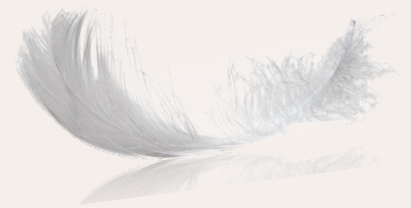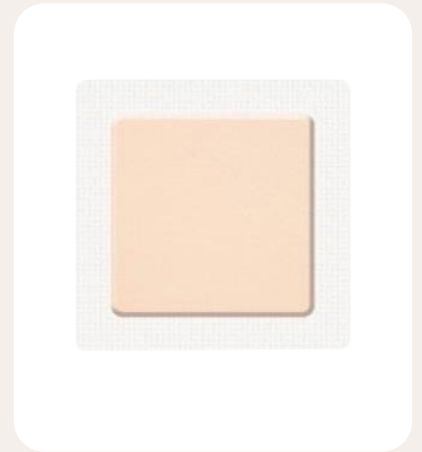

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

- Bei mäßig bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden
- Kann während des gesamten Heilungsprozesses verwendet werden
- Geeignet für die Verwendung unter Kompressionsverbänden

Was sind die Merkmale?

- Fünf Schichten für optimale Flüssigkeitsverteilung, Absorption und Rückhaltung
- Sanfte Silikonschaumschicht für sichere Haftung und atraumatische Entfernung
- Absorbierender Schaum nimmt Exsudat auf und fördert ein feuchtes Milieu
- Vliesstoff leitet Flüssigkeit in die superabsorbierenden Fasern, superabsorbierende Fasern schließen Exsudat sicher ein und verhindern Flüssigkeitsansammlungen



Für mehr
Informationen

Klinisch getestet

98%

Zufriedenheit beim
Exsudatmanagement

100%

positive Bewertung
bei der Anwendung

Klinische Bewertung in Großbritannien,
kliniderm Silikonschaum ist eine „wirksame Alternative“
Wounds UK | Band 11 | Nr. 2 | 2015



Klinion® kliniderm® foam silicone · steril

Haftender Silikonschaumverband für chronische und akute Wunden. Weich, saugfähig und atraumatisch – schafft ein ideales feuchtes Wundmilieu und verhindert das Verkleben mit der Wundoberfläche.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40514823	5 x 5 cm	5	100
40514824	10 x 10 cm	5	100
40514825	15 x 15 cm	5	100
40514826	10 x 20 cm	5	100
40514827	20 x 20 cm	5	100



Klinion® kliniderm® foam silicone border · steril

Haftender Silikonschaumverband mit Hafttrand für einfache, sichere Fixierung. Für chronische und akute Wunden – komfortabel, saugfähig und hautfreundlich.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40514828	7,5 x 7,5 cm	5	100
40514829	10 x 10 cm	5	100
40514830	12,5 x 12,5 cm	5	100
40514831	15 x 15 cm	5	100
40514832	10 x 20 cm	5	100
40514833	10 x 30 cm	5	100
40514834	15 x 20 cm	5	100



Klinion® kliniderm® foam silicone border multisite · steril

Haftender Silikonschaumverband mit Hafttrand für mäßig bis stark exsudierende Wunden. Die Multisite-Form bleibt auch an abweichenden Körperkonturen komfortabel und sicher.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40514822	20 x 20 cm	5	100



Klinion® kliniderm® foam silicone lite · steril

Silikonschaumverband für schwach exsudierende, chronische und akute Wunden. Weich, saugfähig und hautfreundlich – für ein ideales feuchtes Wundmilieu ohne Verkleben.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40514810	6 x 8,5 cm	5	100
40514811	10 x 10 cm	5	100
40514812	15 x 15 cm	5	100
40514813	20 x 50 cm	4	80



Klinion® kliniderm® foam silicone lite border · steril

Haftender Silikonschaumverband mit Hafttrand für schwach exsudierende Wunden. Sichere Fixierung, angenehmer Tragekomfort und atraumatischer Verbandwechsel.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40514814	4 x 5 cm	10	100
40514815	5 x 12,5 cm	5	100
40514816	7,5 x 7,5 cm	5	100
40514817	10 x 10 cm	5	100
40514818	15 x 15 cm	5	100



SILIKONTECHNOLOGIE

Alle Varianten basieren auf hochwertigem Polyurethanschaum. Die Silikonschicht ermöglicht einen besonders schonenden Verbandwechsel und ein angenehmes Tragegefühl.

KLINIDERM® SUPERABSORBENT DRESSING

kliniderm® Superabsorber

Nimmt Exsudat sicher auf.
Bindet es dauerhaft.



Wann sollte das Produkt angewendet werden?

- Bei mäßig bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden
- Kann unter Kompression verwendet werden

Was sind die Merkmale?

- Besteht aus vier Lagen für die optimale Absorption und Rückhaltung
- Reduziert das Risiko des Durchnässens
- Superabsorbierende Polymere binden Flüssigkeit, Bakterien und MMPs
- Angenehmer Tragekomfort
- Die Zwischenschicht verteilt das Exsudat gleichmäßig in der absorbierenden Schicht
- Einzigartige patentierte Versiegelung
- Hervorragende Absorptions- und Rückhalteeigenschaften auch unter Kompression



Für mehr
Informationen

Klinisch getestet

- **65%**

Verbandkosten

- **26%**

Verbandverbrauch

Klinische Bewertung in Großbritannien,
innerhalb von drei Monaten
Wound Essentials 2015 | 10(1)



Klinion® kliniderm® superabsorbent dressing · steril

Für mäßig bis stark exsudierende chronische und akute Wunden. Vier Schichten sorgen für optimale Absorption und Rückhaltung – auch unter Kompression – und reduzieren das Risiko des Durchnässens. Weiße Wundkontaktschicht, grüne Außenschicht. Nicht zuschneiden oder zerreißen.


REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40511700	7,5 x 7,5 cm	50	400
40511701	10 x 10 cm	50	400
40511707	10 x 15 cm	10	40
40511702	10 x 20 cm	50	400
40511708	15 x 20 cm	10	40
40511703	20 x 20 cm	15	120
40511704	20 x 30 cm	10	80
40511705	20 x 40 cm	10	80



KLINIDERM® SKIN ADHESIVE

Klinion® Hautkleber

Sicherer Wundverschluss.
Einfach anzuwenden.

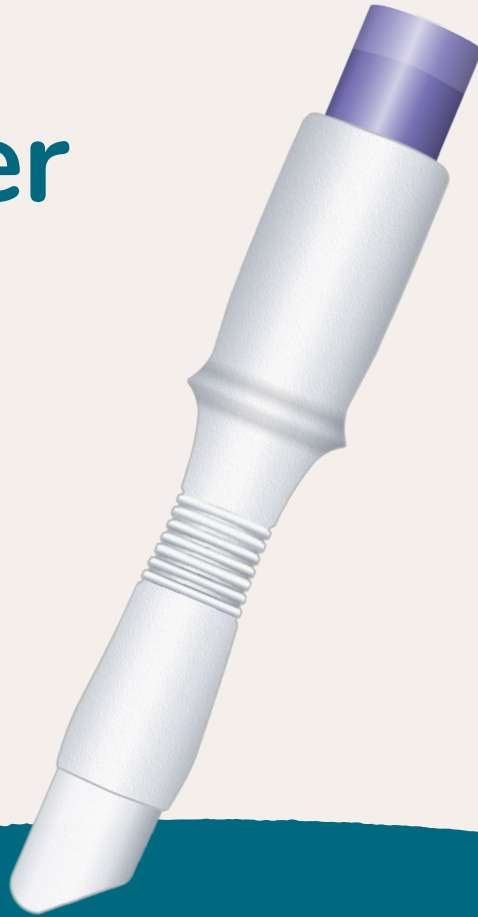

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

- Für einfache, gereinigte traumatische Schnittwunden
- Für Stichinzisionen aus minimalinvasiven Eingriffen
- Für chirurgische Hautschnitte
- Kann ergänzend zu tiefen Hautnähten verwendet werden

Was sind die Merkmale?

- Innovativer SurgiSeal Stylus® Applikator für eine einfache und präzise Anwendung
- Kurze Vorbereitungszeit in nur drei Schritten
- Volle Klebekraft nach ca. 60 Sekunden
- Antimikrobielle Schutzbarriere über der Wunde
- Gleichmäßiger Klebstoffauftrag durch spezielle Applikatorspitze
- Farbänderung der Spitze signalisiert den Kontakt mit dem Klebstoff



Für mehr
Informationen

Klinisch getestet

~ 60 sec

Bis zur vollen
Klebekraft

99,5 %

Positiver
Gesamtnutzen

100%

bessere oder gleichwertige
kosmetische Ergebnisse

Klinische Vergleichs-
bewertung

Multicenter-Studie | 08 2011



Klinion® skin adhesive

Professioneller flüssiger Hautkleber (2-Octylcyanacrylat) mit innovativem Applikator für eine einfache, präzise Anwendung. Für chirurgische Hautschnitte, Stichinzisionen minimalinvasiver Eingriffe und einfache gereinigte Risswunden.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40115500	0,5 ml	12	576



Folienverbände

Klinion® kliniderm® film · steril

Transparenter, semipermeabler und selbstklebender Folienverband für oberflächliche Wunden mit leichtem Exsudat. Schafft ein ideales Wundklima und ermöglicht die sichere Fixierung.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40514840	4 x 5 cm	50	600
40514841	5 x 7,2 cm	50	600
40514842	10 x 10 cm	50	600
40514843	10 x 12 cm	50	600
40514844	10 x 15 cm	50	600
40514845	10 x 20 cm	50	300
40514846	10 x 25 cm	50	300
40514847	10 x 30 cm	50	300
40514848	15 x 20 cm	50	300
40514849	20 x 30 cm	50	300



Klinion® kliniderm® film with pad · steril

Transparenter Folienverband mit integriertem Saugkissen für oberflächliche Wunden mit leichtem Exsudat. Semipermeabel, selbstklebend und sicher fixierend.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40514860	5 x 7,2 cm	50	600
40514861	10 x 10 cm	50	600
40514862	10 x 12 cm	50	600
40514864	10 x 20 cm	50	300
40514865	10 x 25 cm	50	300
40514868	15 x 20 cm	50	300



Pflaster und Kompressen

Klinion® kliniplast® border · steril

Randpflaster für trockene oder gering exsudierende Wunden, z. B. postoperativ. Elastische Vliesunterlage, nicht-haftende Wundunterlage, abgerundete Ecken – schnell und einfach anzulegen.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
294200	5 x 7 cm	50	1.200
294201	8 x 10 cm	50	300
294203	8 x 15 cm	50	300
294208	10 x 15 cm	50	300
294209	10 x 20 cm	50	300
294210	10 x 25 cm	50	300
294211	10 x 30 cm	50	300
294212	10 x 35 cm	50	200



Klinion® klinipress® exupad · steril

Saugfähige Vliesstoffkompressen für mäßig sezernierende Wunden. Weicher Baumwollkern für effektive Aufnahme und Verteilung von Exsudat. Flüssigkeitsabweisende Außenschicht schützt vor Auslaufen. Weiß: Wundseite, Blau: Außenseite.

REF	Größe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
170000	9 x 12 cm	50	400
170002	10 x 20 cm	35	280
170003	20 x 20 cm	15	120
170004	20 x 30 cm	10	80
170005	20 x 40 cm	6	48



Fixierbinden und Kompression

Klinion® klinidur® compression bandage · steril

Kurzzugbinde für die ambulante Kompressionstherapie – hoher Druck bei Aktivität, niedriger Druck in Ruhe. Ideal zur Kontrolle von Ödemen.

REF	Größe	Farbe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
40516002	5 m x 8 cm	dunkelbeige	10	120
40516003	5 m x 10 cm	dunkelbeige	10	80
40516004	5 m x 12 cm	dunkelbeige	10	80



Klinion® klinifix® cohesive fixation bandage 4 m · unsteril

Kohäsive elastische Fixierbinde, weiß.

REF	Größe	Farbe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
132378	4 m x 4 cm	weiß	5	280
132379	4 m x 6 cm	weiß	5	280
132380	4 m x 8 cm	weiß	5	140
132381	4 m x 10 cm	weiß	5	140
132382	4 m x 12 cm	weiß	5	140



Klinion® klinifix® cohesive fixation bandage 20 m · unsteril

Kohäsive elastische Fixierbinde.

REF	Größe	Farbe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
132384	20 m x 4 cm	weiß	1	24
132386	20 m x 6 cm	weiß	1	24
132387	20 m x 8 cm	weiß	1	24
132388	20 m x 10 cm	weiß	1	24
132389	20 m x 12 cm	weiß	1	24
132376	20 m x 6 cm	blau	1	24
132383	20 m x 6 cm	rot	1	24



Klinion® klinigrip® ideal bandage

Elastische Stützbinde, 100 % Baumwolle, latexfrei. Ausfranssicher und waschbar bei 60 °C, mit dauerhaft hoher Elastizität. Länge gedehnt: 5 m. Zur unterstützenden Versorgung bei Zerrungen, Verstauchungen und Verletzungen.

REF	Größe	Farbe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
132440	5 m x 4 cm	weiß	10	40
132441	5 m x 6 cm	weiß	10	40
132442	5 m x 8 cm	weiß	10	40
132443	5 m x 10 cm	weiß	10	40
132444	5 m x 12 cm	weiß	10	40
132445	5 m x 15 cm	weiß	10	60
132446	5 m x 20 cm	weiß	10	50



Bastos Viegas® elastic bandage

Elastische Fixierbinde für die mittlere Unterstützung – aus Viskose, Polyurethan und Polyamid. Die Zwei-Wege-Elastizität ermöglicht ein einfaches Anlegen an allen Körperbereichen. Angenehm zu tragen.

REF	Größe	Farbe	Inhalt Karton (Stück)	Inhalt Umkarton (Stück)
415-001	5 m x 6 cm	weiß	10	400
415-002	5 m x 8 cm	weiß	10	280
415-003	5 m x 10 cm	weiß	10	240
415-004	5 m x 12 cm	weiß	10	200
415-005	5 m x 15 cm	weiß	10	160
415-006	5 m x 20 cm	weiß	10	120



EIN PARTNER. EIN NETZWERK. EINE DURCHGÄNGIGE VERSORGUNG.

Die perfekte Verbindung von drei Bereichen

Unser Ziel ist es, sowohl Patienten und Angehörige als auch medizinische Fachkräfte bestmöglich zu unterstützen und dadurch eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Dabei sind hochwertige Produkte und individuelle Versorgungslösungen für unterschiedliche Therapiebereiche die Grundlage.

Weiter begleiten wir als erfahrener Partner im Entlassmanagement Patienten auch beim Übergang aus der Klinik in das häusliche Umfeld oder in eine Pflegeeinrichtung. Dabei koordinieren wir die weitere Hilfsmittelversorgung, unterstützen bei organisatorischen Abläufen und sichern die Therapiekontinuität.

So entlasten wir Klinikteams, schaffen reibungslose Übergänge und geben Patienten sowie Angehörigen die Sicherheit einer kompetenten Versorgung über alle Versorgungsphasen hinweg.

Für Klinikpersonal Mediq Own Brands



Hochwertige Produkte und Lösungen für diverse medizinische Anwendungen, unter anderem Wundversorgung und Pflegehilfsmittel

Unterstützung für Pflegeeinrichtungen



Anwendungsberatung und Lieferung medizinischer Produkte

Überleitung aus der Klinik (Entlassmanagement)



Individuelle Beratung bei der Hilfsmittelversorgung, Entlassmanagement, inklusive Versorgungsvorschlag an Ärzte, Anleitung zu Hause, Stakeholder-Kommunikation

UNSERE VERSORGUNGSBEREICHE



Wund-
versorgung



Ableitende
Inkontinenz



Enterale
Ernährung



Stoma-
versorgung



Diabetes-
versorgung



Tracheostoma-
versorgung



APAT



Parenterale
Ernährung

QUALITÄT DIE MAN FÜHLT

KLINION® WOUND CARE

- ✓ Marke mit Premiumqualität
- ✓ Lösungen für alle Wundstadien
- ✓ Einfach in der Anwendung
- ✓ Bester Komfort für Patienten
- ✓ Faire Preise
- ✓ Klinisch bewährt

Muster & Beratung anfragen

Gerne unterstützen wir Sie mit Produktmustern, Informationen und einer individuellen Beratung für Ihre Einrichtung.

Ihre Ansprechpartner in Ihrer Region.



Arndt Dünweg

Sales Manager – Region West

arndt.duenweg@mediq.com
T: 0173 3498402



Christian Masmeier

Sales Manager – Region Nord-West

christian.masmeier@mediq.com
T: 0173 3498420



Christina Miket

Sales Managerin – Region Nord-Ost

christina.miket@mediq.com
T: 0172 6695346



Mamta Singh

Sales Managerin – Region Rhein-Main

mamta.singh@mediq.com
T: 0172 6366581



Alexander Schmitt

Sales Manager – Region Süd-West

alexander.schmitt@mediq.com
T: 0172 3298112



Tino Schneider

Sales Manager – Region Ost

tino.schneider@mediq.com
T: 0171 5196033



Alexandra Adelaide Wittwer

Sales Managerin – Region Bayern

alexandra.wittwer@mediq.com
T: 0173 3498483



Mediq Deutschland GmbH
In der Bruchwies 10 · 66663 Merzig
Telefon 0800 5196100 · Fax 0800 5196101
business@mediq.de · www.mediq.de



MD/M/0056/V01/2026-07